



■ アルカリイオン整水器の仕組み

水道水を浄水カートリッジで塩素、トリハロメタン、農薬などを除去し、さらに電気分解をして「きれい」で「おいしい」アルカリイオン水と、「洗顔」にご利用できる酸性水をご提供します。

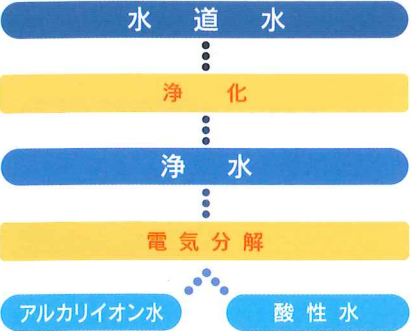

■ 電気分解の仕組み

カートリッジで浄化されたピュアな水を電気分解します。マイナス⊖側の電極には、水素、水酸イオンが多くなり、「アルカリイオン水」を生成。プラス⊕側の電極には酸素、水素イオンが多くなり、「酸性水」が生成されます。

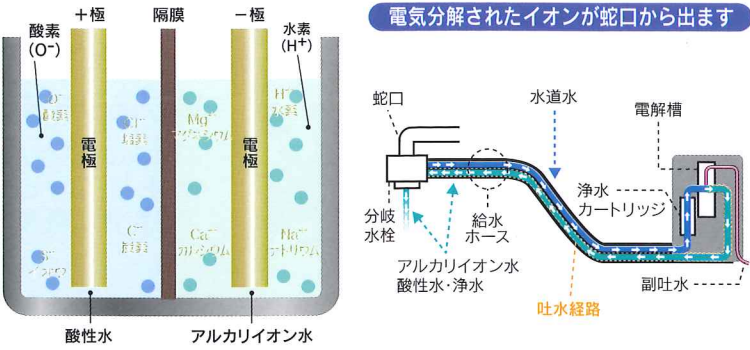

■ 製品仕様

類別	機械器具(83)医療用物質生成器	電 解	(処理水量)最大5.0L/分
一般的名称	連続式電解水生成器 (JMDNコード71024000)		(電解能力切替)5段階(浄水・1・2・3・強電解)
医療機器分類	管理医療機器		(電解槽)リバーシブル電極
適用規格	日本ホームヘルス機器工業会 「医療用物質生成器安全基準」に適合		(電極材質)チタン電極+プラチナコーティング
電気用品安全法	認証番号0091-95013-001	浄 水 能 力 (注1)	(電解槽洗浄)オートクリーニング方式
販売名	ミネワン		(連続使用可能時間)約1時間
型式	G-5000		遊離残留塩素 15t
医療機器承認番号	20800BZZ00226A09		総トリハロメタン 4.8t
本体寸法/重量	高さ295mm×幅240mm× 奥行き110mm/約5kg(乾燥重量)	ろ 過 材 料	CAT(農薬) 15t
定格電圧/定格電流	AC100V/2.5A 50/60Hz		2-MIB(カビ臭) 2.2t
最高使用水温	約40℃		鉛 10t
使用水道圧範囲	0.07MPa~0.59MPa		銀添粒状活性炭・鉛除去対応イオン交換繊維・ 繊維活性炭・ゼオライト・亜硫酸カルシウム
給水使用/給水接続	吐水蛇口分岐式・分岐水栓セット	カートリッジ交換案内	14tで交換時期予告LED点滅/15tでLED点灯
給水水质	飲用適の水(水道法基準)	カートリッジ交換方法	ワンタッチ回転脱着方式
吐水方式	分岐水栓(Uターン方式)	カルシウム添加	強制溶解型添加方式(電解補助剤として)
操作方法	押しボタンスイッチ	電源保護装置	電流ヒューズ
電解方法	連続式隔膜電解方式	過昇温度保護装置	絶縁トランス温度センサー内蔵
		過電流検出	設定レンジ自動切替
		消耗品	浄水器カートリッジ・グリセロリン酸カルシウム・pH試薬

(注1)JIS S 3201試験による除去率80%の値。水质・水圧によって異なります。

⚠ 注意 安全のために必ずお守り下さい。

- アルカリイオン水を飲用するときには、次のことに注意して下さい。
 - (1)医薬品をアルカリイオン水で飲用しないで下さい。(2)腎不全、カリウム排泄障害などの腎疾患の方は飲用しないで下さい。
 - (3)飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状が改善が見られないときは、飲用を中止し、医師に相談して下さい。
- 水道法の水质基準に不適合な原水は処理できません。
- 地域によって塩素除去能力に多少の差があります。
- 次のような方はご使用前に医師にご相談下さい。
 - (1)医師の治療を受けている方 (2)持病のある方または身体の弱っている方 (3)腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方
- 初めてご使用になる場合、「アルカリ1」より少量ずつ(コップ1~2杯)2週間程度、アルカリイオン水に慣れて頂き、順次pHを上げてご使用される事をおすすめします。
- 下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談下さい。

ご使用上の注意

- 正しくお使い頂く為に、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 ●硬水を軟水に変えることはできません。 ●本器は日本国内の飲用可能な水を対象としております。

お問い合わせ・お申し込み先

総発売元



株式会社 グランツ

本社/金沢市隣町97-1 グランツビル 〒920-0971
TEL(076)264-1111(大代表) FAX(076)264-0033
URL:http://www.glanz-group.com

グランツ商事株式会社

東京都港区西新橋2-39-8 鈴丸ビル 〒105-0003
TEL(03)3459-8931(大代表) FAX(03)3459-8560
URL:http://www.glanz-s.com

消費者相談室 0120-318-191

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは予告なく変更することがあります。


アルカリイオン水を使った生活
これから家族の健康が
「きれい」で「おいしい」水で
変わります

医療用アルカリイオン水生成器

ミネワン®
G-5000



この水があなたの暮らしと健康を変える。

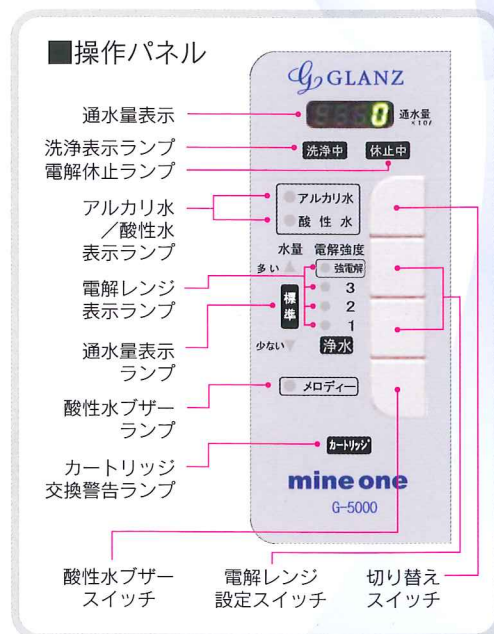

ミネワン

G-5000

標準本体価格 ¥260,400【税込】
(取付工事費 ¥15,750)

管理医療機器 医療機器承認番号: 20800BZZ00226A14
製造販売元: 株式会社 アルテック

安心の
3年保証

アルカリイオン整水器の開発・技術・品質管理・実績に「きれい」で「おいしい」生きた水への追求心とお客様本位のサービスに徹し、高品質な製品をご提供することをコンセプトに、ミネワンG-5000は3年保証(消耗品は除く)と安心してご利用できます。
※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。
尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。



鉛除去
機能搭載

ゼオライト
カートリッジ搭載

パワフル

アルカリイオン水を最大毎分約4ℓ生成

- 長時間連続で使用できます。(但し、水質及び使用条件によって適用されない場合は、休止中のランプでお知らせ)
- カートリッジは約1年間使用可能です。(4人家族で塩素濃度2ppm、40ℓ/日使用の場合)

安全簡単

お好みの水質をワンタッチ選択

- 5段階の目盛りで、pHレンジを自由に調節でき、適正な通水量をランプでお知らせします。
- マイコン制御で過電流を防止。電解質を多く含む水や過電流が発生した場合は、休止中ランプでお知らせします。
- カートリッジ取替時期を自動的にお知らせ。流量センサーが使用水量をキャッチ、『カートリッジ』のランプが点灯します。
- 酸性水使用時はアラームでお知らせします。
- 熱水遮断機能を採用した便利な「シャワー機能付き分岐水栓」が標準付属。

清潔浄化

制菌力に優れた完全自動洗浄機能

- 制菌力に優れた銀添粒状活性炭がろ過、清潔にします。
- 生成器は通水ごとに自動洗浄します。
- 抗菌ホースを標準付属。

省スペース

場所をとらないUターン方式を採用

- ホースの長さ分、置き場所を自由に選べます。
- 据え置き、壁掛けどちらにも対応。

※数値は水質・水温・通水量により異なります。

「きれい」
で
「おいしい水」



Healthy & Tasty
胃腸にやさしい **アルカリイオン水**

飲用、お料理はもちろん、胃腸内の異常発酵、慢性下痢、消化不良、胃酸過多に制酸効果があります。

ごはんの炊き水、お味噌汁・お吸物、煮物、お茶、コーヒー、緑色野菜のゆがきやアク抜きに最適です。



「美容」
と
「力のある水」



Beauty
お肌しっとり美肌効果 **酸性イオン水**

アストリンゼン効果で、お肌をひきしめます。
弱酸性のアストリンゼン液として、入浴、洗顔の後にご使用下さい。

「安全」な水



Pure & Safety
塩素・有害物質を除去 **浄水**

赤ちゃんのミルク作りやお薬を飲むときにご使用下さい。

